

Gebruiksaanwijzing

Droogpoederinhalator (MRX003-T10 DPI)

REF MRX003-R, MRX003-Y, MRX003-B

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de droogpoederinhalator (DPI) begint te gebruiken en elke keer dat u uw inhalator vervangt. Ze kan nieuwe informatie bevatten.

Beoogd gebruik:

De droogpoederinhalator (DPI) (MRX003-T10 DPI) is een mechanisch, handbediend, herbruikbaar, ademhalingsgesteuurd, op capsules gebaseerd inhalatieapparaat voor pulmonale dosering en toediening van geneesmiddelen in poedervorm.

De DPI wordt gebruikt in combinatie met droogpoederencapsules die geneesmiddelen bevatten die worden gebruikt voor de behandeling van longziekten.

Patiëntdoelgroep

Het apparaat is bedoeld voor zelftoediening van de therapie door de patiënt, of voor toediening aan de patiënt door een mantelzorgverlener. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen (d.w.z. personen van 18 jaar of ouder) met symptomen van COPD.

Klinisch voordeel:

Het apparaat maakt inhalatie mogelijk van het geneesmiddel dat zich in de capsules bevindt, voorgeschreven door een zorgverlener.


Het apparaat is bedoeld voor de toediening van een onderhoudsbehandeling met bronchodilatator ter verlichting van de symptomen bij COPD-patiënten; *het product is niet bedoeld voor gebruik bij de initiële behandeling van acute episodes van bronchospasmen, d.w.z. als noodtherapie.*

Prestatiekenmerken:

De DPI, waarin u de droogpoederencapsule dient te plaatsen, maakt gaatjes in de capsule en maakt inhalatie van het poeder mogelijk. Het apparaat wordt eenmaal per dag gebruikt met één capsule voor de toediening van het geneesmiddel.

Voorzorgsmaatregelen:

- **Gebruik uw droogproductinhalator niet** om een ander geneesmiddel in te nemen dan droogpoederencapsules ("capsules").
- **Gebruik de droogpoederinhalator niet** na de vervaldatum van het apparaat.
- **Gebruik de droogpoederinhalator niet** langer dan 6 maanden (180 verstuvingen)

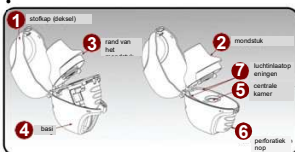


De onderdelen van uw droogpoederinhalator zijn: (Zie Afbeelding A)

1. stopkap (deksel),
2. mondstuk,
3. rand van het mondstuk,
4. basis,
5. centrale kamer,
6. perforatieknop,
7. luchtinlaatopening en

Afbeelding A

Het innemen van uw volledige dagelijkse dosis medicatie vereist 4 hoofdstappen:


Stap 1. Uw droogpoederinhalator openen:

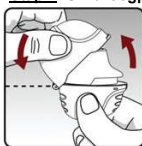

Afbeelding B

Nadat u uw droogpoederinhalator uit het zakje heeft gehaald:

- Open de stopkap (deksel) door de voorste rand op te tillen.
- Trek de stopkap (deksel) omhoog van de basis om het mondstuk bloot te leggen. (Zie Afbeelding B).

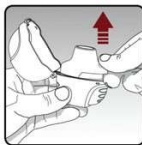

Afbeelding C

- Open het mondstuk door de rand van het mondstuk omhoog en weg van de basis te trekken, zodat het centrale compartiment zichtbaar is. (Zie Afbeelding C)

Stap 2. De capsule in uw droogpoederinhalator plaatsen:



Afbeelding D

Haal een capsule uit de blisterverpakking (alleen onmiddellijk voor gebruik, zie hantering blisterverpakking) en plaats de capsule in het middenvak van uw droogpoederinhalator. Het maakt niet uit welke kant van de capsule naar boven of naar beneden is gericht. (Zie afbeelding D)



Afbeelding E

Sluit het mondstuk stevig tegen de grijze basis totdat u een klik hoort. Laat de stopkap (deksel) open. (Zie Afbeelding E)

Stap 3. De capsule doorprikken:



Afbeelding F

- Houd uw droogpoederinhalator vast met het mondstuk naar boven gericht. (Zie Afbeelding F)
- Druk de perforatieknop één keer volledig in tot hij niet verder kan, en laat hem dan los. Dit is hoe u gaatjes in de capsule maakt, waardoor het geneesmiddel vrijkomt wanneer u inademt.
- **Druk niet** meer dan één keer op de perforatieknop.
- **Duw niet** omhoog op de basis terwijl u de perforatieknop indrukt. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat opengaat, bijvoorbeeld voor reiniging (zie Afbeelding J).
- Houd uw inhalator rechtop
- **Schud uw droogpoederinhalator niet.**


Stap 4. Uw volledige dagelijkse dosis innemen (2 inhalaties uit dezelfde capsule):



Afbeelding G

Adem volledig uit in 1 ademdeug en maak uw longen volledig leeg. (Zie Afbeelding H)

Belangrijk: Adem niet in uw droogpoederinhalator.

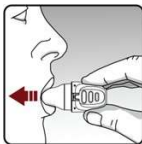


Afbeelding H

Met uw volgende ademdeug neemt u uw geneesmiddel in:

- **Houd uw hoofd rechtop terwijl u recht vooruit kijkt.** (Zie Afbeelding H)
- Breng uw droogpoederinhalator horizontaal naar uw mond. Blokkeer de luchtinlaatopeningen niet.
- Sluit uw lippen stevig om het mondstuk.
- Adem langzaam en diep in totdat uw longen vol zijn. U zou de capsule moeten horen en/of voelen trillen (rammelen). (Zie Afbeelding H)
- Houd uw adem een paar seconden in en haal tegelijkertijd uit uw mond.
- Adem weer normaal. Hervat de normale ademhaling. Herhaal stap 4 één keer om de capsule volledig leeg te maken.

Belangrijk: Druk niet nogmaals op de perforatieknop.

Onderhoud en bewaring van uw droogpoederinhalator:

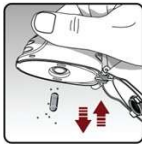

Afbeelding I

Nadat u uw dagelijkse dosis heeft ingenomen, open u het mondstuk en gooit u de gebruikte capsule in uw prullenbak.

Verwijder eventuele stukjes van de capsule of opgehoopt poeder door uw droogpoederinhalator ondersteboven te draaien en er voorzichtig, maar stevig op te tikken. (Zie Afbeelding I). Sluit vervolgens het mondstuk en de stopkap voor opslag.



Bewaar de droogpoederinhalator bij kamertemperatuur (niet meer dan 30 °C).

Uw droogpoederinhalator reinigen:



Afbeelding J

Reinig uw droogpoederinhalator maandelijks. (Zie Afbeelding J)


Het duurt 24 uur om uw droogpoederinhalator aan de lucht te laten drogen na reiniging.

- **Gebruik geen** reinigingsmiddelen of wasmiddelen.
- **Plaats uw droogpoederinhalator niet** in de vaatwasser om hem te reinigen.

Reinigingsstappen:

- Open de stopkap en het mondstuk.
- Open de basis door de perforatieknop naar boven te drukken.
- Kijk in het centrale compartiment of er stukjes capsule of poeder zijn opgehoopt. Als u deze ziet, tik ze er dan uit.
- Spoel uw droogpoederinhalator af met warm water en druk een paar keer op de knop, zodat het centrale compartiment en de priksnaal onder het stromende water staan. Controleer of eventuele poederophoping of capsulestukjes zijn verwijderd.
- Droog uw droogpoederinhalator goed door het overtollige water op een papieren handdoek te laten lopen. Laat het apparaat daarna aan de lucht drogen, waarbij u de stopkap, het mondstuk en de basis volledig open laat zodat het geheel volledig kan drogen.
- **Gebruik geen** föhn om uw droogpoederinhalator te drogen.
- **Gebruik uw droogpoederinhalator niet** als deze nat is. Indien nodig kunt u de buitenkant van het mondstuk reinigen met een schone, vochtige doek.

Hantering blisterverpakking

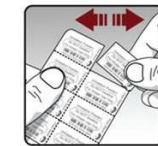

Afbeelding


Verwijder elke dag slechts 1 blister van de blisterverpakking door langs de perforatielijntje te scheuren. (Zie afbeelding K)



Afbeelding

Haal de capsule uit de blister:

- Knip de folie niet door en gebruik geen scherpe voorwerpen om de capsule uit de blister te halen.
- Vouw 1 van de blisterhoeken met een pijltje om en scheid de aluminiumfolieelagen van elkaar.
- Trek de bedrukte folie af totdat u de volledige capsule ziet (alleen onmiddellijk vóór gebruik). (Zie Afbeelding L)
- Als u meer dan 1 blister heeft opengemaakt, mag de extra capsule niet gebruikt worden en moet deze weggegooid worden.

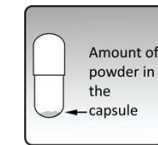

Afbeelding M

Elke capsule bevat slechts een kleine hoeveelheid poeder. (Zie afbeelding M) Dit is 1 volledige dosis.

Open de capsule niet, anders werkt het mogelijk niet.

Restricçõ's

Belangrijke tips om ervoor te zorgen dat u de volledige dosis van uw geneesmiddel op de juiste manier inneemt:

- Druk 1 keer op de perforatieknop; Adem 2 keer in; Adem volledig uit vóór elk van de 2 inhalaties.
- Om elke dag uw volledige dosis medicatie te krijgen, moet u **2 keer** uit dezelfde capsule inademen. Zorg ervoor dat u elke keer volledig uitademt voordat u uit uw droogpoederinhalator inademt
- Houd uw droogpoederinhalator met het mondstuk naar boven gericht wanneer u op de perforatieknop drukt.
- **Druk 1 keer op de perforatieknop** om de capsule te doorprikken.
- **Adem niet** uit in uw droogpoederinhalator.
- Houd uw droogpoederinhalator in een horizontale positie en houd uw hoofd rechtop, terwijl u recht vooruit kijkt, wanneer u inademt.
- Controleer de centrale kamer van uw droogpoederinhalator op capsuleresten of poederophoping. Als er resten of poeder zichtbaar zijn, tik deze er dan uit vóór gebruik.
- Reinig uw droogpoederinhalator maandelijks en droog deze grondig af.

Waarschuwingen/Voorzorgsmaatregelen

- Er zijn geen bekende contra-indicaties voor dit apparaat.
- Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van het apparaat.
- **Gebruik het apparaat niet** als het zichtbaar beschadigd is of als er een capsule in het apparaat achterblijft.
- Raadpleeg een zorgverlener in geval van abnormale reacties op het gebruik van het hulpmiddel.
- Meld elk probleem met het apparaat dat kan leiden tot een verslechtering van de gezondheid aan de fabrikant of de plaatselijke gezondheidsautoriteit.

Wettelijke fabrikant

van de droogpoederinhalator:



Phargent SA
Via Figno 6
6917 Barbengo
CH

Aanvullende symbolen (hierboven niet verklaard):

- REF Catalogusnummer
- # Modelnummer
- LOT Partijnummer
- CE CE-conformiteitsmarkering
- EU REP Geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU
- EU-importeur
- UDI Unieke apparaatidentificatie
- Vervaldatum van het apparaat
- MD Medisch hulpmiddel



Uitgegeven: JUN2025
Versie: IFU-V10-DO